



MESI

Simplifying Diagnostics

Ръководство за бърз старт


MESI mTABLET

Безжична система на медицински таблет


КАКВО СЪДЪРЖА ОПАКОВКАТА?

Медицински клас таблет


Модел
MTABMD

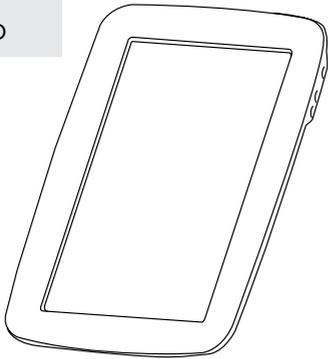

Екраниран Ethernet кабел – 2 м

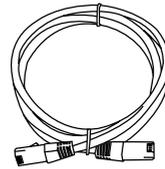


AC/DC захранване за MTABDSW.

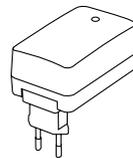

Зарядна станция MESI mTABLET
с точка за достъп.


Модел
MTABDSW

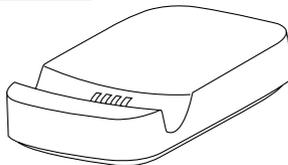

Преди да използвате аппарата за пръв път, прочетете внимателно ръководството за потребителя и спазвайте препоръките, дадени тук:
www.mesimedical.com/support/mTABLET/IFU.

ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Свързване на базовата станция

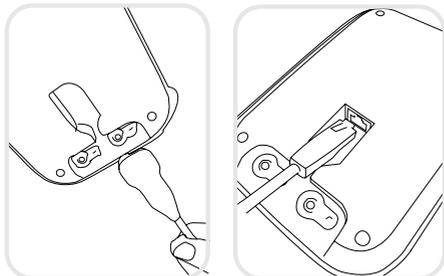

Свържете базовата станция към захранването и към локалната мрежа с помощта на предоставените мрежов кабел и адаптер за захранване.

2. Настройка на MESI mTABLET



Преди първото използване сложете MESI mTABLET в базовата станция, за да се зареди.

Когато MESI mTABLET се зареди, натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. От дясната страна на таблета, за да включите апарата.

3. Първо стартиране



Тъй като MESI mTABLET предлага няколко езика, изберете **езика**, който искате да използвате, от падащото меню. Тази настройка може да се променя по-късно в потребителските настройки.


Базовата станция за апарата MESI mTABLET се доставя с **вградена точка за достъп до Wi-Fi**, към която апаратът MESI mTABLET ще се свърже автоматично при първото използване.

Ако искате да използвате друга безжична мрежа, изберете я от списъка и въведете информацията за сигурност.

Wi-Fi връзка не се изисква за основните функции на MESI mTABLET, но е необходима за синхронизиране на измерванията с уеб приложението MESI mRECORDS.

СДВОЯВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧЕН МОДУЛ

Преди извършването на някакви записи съответният модул трябва да бъде сдвоен с Вашия апарат MESI mTABLET. Отворете раздела за потребител на MESI mTABLET.

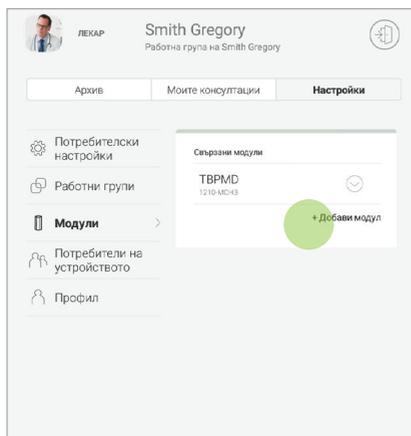


Стъпка 1

Отидете на **Потребителски профил** > **Настройки** > **Модули** > **+Добавяне на модул**


Стъпка 2

Натиснете бутона в горната част на съответния модул.

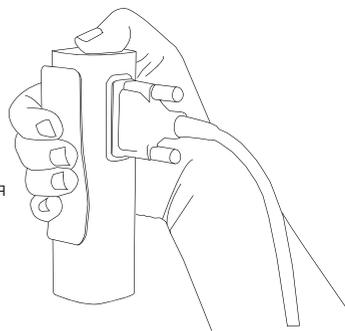


Стъпка 3

Когато апаратът MESI mTABLET установи връзка с модула, светлината в горната част на модула ще се промени. Потвърдете процеса на сдвояване чрез повторно натискане на бутона в горната част на модула.

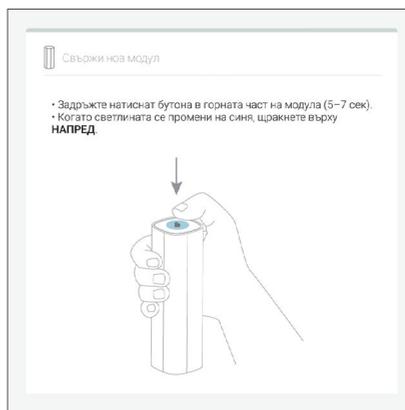

Стъпка 4

Последният екран посочва успешна връзка между MESI mTABLET и безжичния модул. Достъп до цялата техническа информация за свързаните модули ще намерите в **Потребителски профил** > **Настройки** > **Модули**.

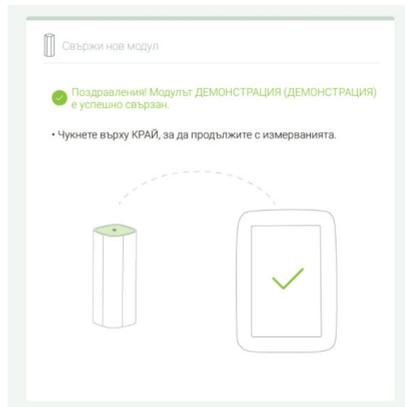

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Потребителите на MESI mTABLET трябва да са адекватно обучени как да използват апарата. Преди първата употреба на апарата потребителите трябва да прочетат внимателно целите инструкции за употреба и да спазват инструкциите за употреба на свързаното оборудване.



Използвайте само аксесоари и други части, препоръчани или доставяни от MESI. Използването на различни от препоръчителните или доставяните части може да доведе до нараняване, неточна информация и/или повреда на апарата.



Не използвайте апарата в места, където има някаква опасност от експлозия или при наличието на запалими газове, като анестетици.



AC/DC захранването трябва да е свързано към лесно достъпен контакт (AC/DC захранването служи също като галванична изолация). За предотвратяване на токов удар не разглобявайте апарата. Вътре в него няма подлежащи на сервизно обслужване части. Сервизното обслужване трябва да се извършва само от квалифициран персонал.



Използвайте само неагресивни почистващи препарати за почистване на апарата. Апаратът може да се забърсва с влажна кърпа.



Защитете апарата от влага и течности, както и от екстремно високи/ниски температури. Защитете апарата и от механичен стрес и не го излагайте на въздействието на пряка слънчева светлина, тъй като това може да доведе до неправилно функциониране на апарата.



Никога не извършвайте самостоятелно никакви ремонти. Не отваряйте апарата. Апаратът не съдържа части, които могат да се сменят от потребителя. Не променяйте и не адаптирайте апарата. При поява на дефект се свържете с Вашия търговец или дистрибутор.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИСТРИБУТОРА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С MESI

Адрес MESI, development of medical devices, Ltd
Leskoškova cesta 11a
SI-1000 Ljubljana
Словения, Европейски съюз

Телефон +386 (0)1 620 34 87
Имейл info@mesimedical.com
Уебсайт www.mesimedical.com

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ

1. Регистрирайте Вашия профил на потребител

Вход в системата
Имам профил в MESI

Регистрация
Нов потребител съм

* Име
Въведете името си

* Парола
Въведете парола
Парола трябва да бъде поне 6 знака и не трябва да съдържа повече от един специален знак

* Потвърждение на парола
Въведете парола

* Държава
Изберете държава

* Рол
 Лекар Медицинска сестра

* Условие и споразумение
 Съгласен съм [Обяснение на MESI](#)

ВЪРХУ ДОСТЪП

Регистрация

(2/4) Регистрация

* Име
Doctor

* Фамилия
Фамилия

* Специализация
Анестезиология

Снимка на профила

ОТКАЗ

ОК

Всеки потребител на MESI mTABLET трябва да регистрира профил, който ще му позволява също така сигурен достъп до данните на други устройства (персонален компютър, таблет, телефон, ако е необходимо).

2. Работни групи

Работна група (3/4)

Създадохме нова работна група Doctor S

* Ниво на грижи
Първично

* Сектор
Обществен

* Име на практиката
Име

Службен телефонен номер
Телефонен номер

Службен номер на факс
Службен номер на факс

* Адрес на практиката
Улица
Код
Град
Алжир

Имейл на практиката
Имейл адрес

Уебсайт на практиката
Въведете уебсайт

ОТКАЗ

ОК

Всеки лекар може да е собственик само на една работна група, но може да бъде поканен в много работни групи. Същевременно той може да добавя множество медицински сестри или лекари в своята работна група. Медицинските сестри, от друга страна, могат да са част от много работни групи, но не могат да създават такава или да добавят хора в нея. Тази система позволява по-обширен общ поглед върху достъпа до данни на пациентите.

MESI mRECORDS

Достъпът до MESI mRECORDS е със същите данни за удостоверяване на потребител, каквито са за MESI mTABLET, на адрес <https://mrecords.mesimedical.com>. Тъй като mRECORDS е уеб приложение, имате достъп до него отвсякъде и по всяко време. Всички измервания и данни на пациенти се синхронизират между MESI mTABLET и MESI mRECORDS, предоставяйки по този начин на медицинския специалист незабавен достъп до записаните измервания.

За повече информация и обучителни материали, моля, влезте в профила си или регистрирайте такъв на адрес <https://mrecords.mesimedical.com>.

