

Vodič za korisnike

Broj modela: NCBG1

Uvod

molimo pročitaj i spremi ove upute

Hvala ti što si kupila NC° Band. Pažljivo pročitaj ove upute kako bi osigurala pravilnu uporabu i siguran rad svoje narukvice. Ako imaš bilo kakvih pitanja ili komentara o narukvici, obrati se Korisničkoj podršci na help@naturalcycles.com.

Namjena uporabe

NC° Band putem Bluetootha prenosi niz različitih biomarkera i namijenjen je promicanju zdravog načina života.


Upozorenja i mjere opreza

- Ovaj proizvod nije namijenjen dijagnosticiranju ili liječenju zdravstvenih problema ili bolesti i ne smije se koristiti kao zamjena za konzultacije i savjete liječnika ili drugog zdravstvenog stručnjaka.
- Drži uređaj podalje od izvora snažnih magnetskih polja električne mreže kako bi se smanjila mogućnost smetnji.
- Uporaba uređaja može biti ograničena u prisutnosti elektromagnetskih smetnji. To može dovesti do problema poput poruka o pogrešci ili kvara zaslona/uređaja.
- Upotreba dodatne opreme, pretvornika i kabela koji nisu specificirani ili isporučeni od strane proizvođača ove opreme može dovesti do povećanog elektromagnetskog zračenja ili smanjenog elektromagnetskog imuniteta ove opreme te rezultirati neispravnim radom.
- Prijenosna RF komunikacijska oprema (uključujući periferne uređaje kao što su antenski kabele i vanjske antene) ne smije se koristiti na udaljenosti manjoj od 30 cm (12 in) od bilo kojeg dijela opreme, uključujući kabele koje je odredio proizvođač. U suprotnom bi moglo doći do smanjenja performansi ove opreme.
- Nemoj zamijeniti bateriju neispravnom vrstom koja može zaobići sigurnosne mjere, bacati bateriju u vatru ili vruću pećnicu, niti je mehanički drobiti ili rezati, jer to može dovesti do eksplozije ili požara. Nemoj ostavljati bateriju u okruženju s izrazito visokom temperaturom, jer to može dovesti do eksplozije ili istjecanja zapaljive tekućine ili plina. Nemoj izlagati bateriju izrazito niskom atmosferskom tlaku, jer to može dovesti do eksplozije ili curenje zapaljive tekućine ili plina.

- Nemoj izlagati bateriju izrazito visokim ili niskim temperaturama ili niskom tlaku zraka na velikoj nadmorskoj visini tijekom uporabe, skladištenja ili transporta.

Mjere opreza

- Ovaj uređaj koristi Bluetooth Low Energy 5.2 za povezivanje s namjenskom aplikacijom za pametne telefone iOS/Android.
- Narukvica je vodootporna, ali nije potpuno nepropusna za vodu. Nemoj nositi uređaj pod tušem. Nikada ne uranjaj narukvicu u vodu ili druge tekućine. Nemoj prokuhavati narukvicu. Za čišćenje i dezinfekciju pogledaj odjeljak Care and Cleaning.
- Čuvaj izvan dohvata male djece i kućnih ljubimaca.
- Nemoj koristiti narukvicu ako postoje znakovi oštećenja ili nakon pada/udara koji je mogao uzrokovati oštećenje. Ako je oštećena, nemoj pokušavati popraviti je. Obrati se korisničkoj podršci na help.naturalcycles.com.
- Nemoj čuvati na izravnom suncu ili pri visokim temperaturama.
- Uporaba uređaja koji proizvode toplinu ili hladnoću, kao što su električne deke, termofori ili paketi s ledom, može narušiti rad uređaja i povećati rizik od ozljede pacijenta.
- Proizvođač preporučuje da na svom pametnom telefonu koristiš lozinku

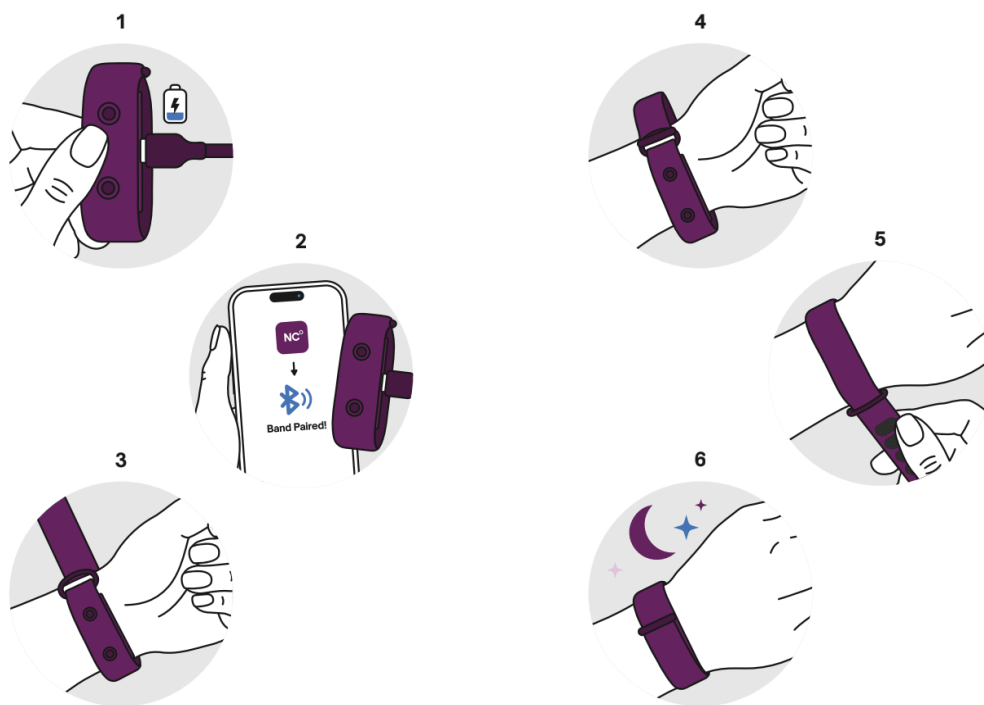

kako koristiti svoj pojas

Stavi narukvicu prije spavanja. Provjeri da je napunjena i čvrsto pričvršćena na donjem dijelu zapešća.

Sinkronizacija podataka s NC App

Možeš sinkronizirati podatke prikupljene tijekom noći na svoj telefon odmah kad se probudiš ili kasnije tijekom dana prateći upute u aplikaciji. Kada otvoriš aplikaciju, noćne temperature će se prenijeti putem Bluetootha. Zatim ćeš na stranici Dodaj podatke vidjeti jednu vrijednost izdvojenu iz noći.

rješavanje problema sa sinkronizacijom temperatura

Ako imaš problema sa sinkronizacijom podataka s narukvice u aplikaciju, posjeti

<https://help.naturalcycles.com/> ili skeniraj QR kod ispod i pronađi upute za različite vrste uređaja.



održavanje trake

upute za njegu i čišćenje

Ne pohranjuj traku na mjestu gdje će biti izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti, prašini ili vlazi. Izbjegavaj ekstremne temperature. Ne pokušavaj rastavljati traku. Očisti i dezinficiraj površinu trake brisanjem maramicama s 70% izopropilnim alkoholom ili blagim sapunom i vodom. Nemoj uranjati u bilo kakvu tekućinu niti sterilizirati u autoklavu. Obriši traku suhom krpom i ostavi je da se osuši na zraku najmanje pet minuta. Nakon čišćenja uređaja ne smije biti vidljive nečistoće.



punjenje narukvice

Ako je baterija uređaja pri kraju, o tome ćeš biti obaviještena u aplikaciji. Uređaj se puni oko 2 sata. Tijekom punjenja, LED svjetlo polako pulsira. Kada je punjenje završeno, svjetlo svijetli stalno. Vijek trajanja baterije je do 14 dana između punjenja.

Specifikacije proizvoda

Unos	5V 1A
Nazivni napon baterije	3,7 V DC
Vrsta baterije	litij-polimer
Trajanje baterije između punjenja	Do četrnaest dana
vrijeme punjenja baterije	Otprilike 2 sata
Raspon mjerenja (temperatura i broj otkucaja srca)	32-42°C (89.6-107.6°F), 30-115 beats per minute
Vodič za preporučeno nošenje	Korisnice moraju nositi narukvicu najmanje četiri sata tijekom noći dok spavaju kako bi se postigla namjena proizvoda
Materijali u kontaktu s kožom	Polikarbonat, ABS, silikon (ako koristiš silikonsku narukvicu), najlon (ako koristiš najlonsku narukvicu)
Radna temperatura	15-40°C (59-104°F)
dimenzije	45,5 × 19,5 × 13 mm
Težina	7 grama (0,25 unce)
funkcija memorije	400 kb
Vijek trajanja	5 godina

Rješavanje poteškoća

Performanse mogu biti pogođene ako se pojavi jedna ili više od sljedećih pogrešaka. Ako naiđeš na neku drugu pogrešku, obrati se korisničkoj podršci.

Greška	Problem/Uzrok	Rješenje
Moj se uređaj ne povezuje s aplikacijom	Ako se tvoj NC° Band ne povezuje s Natural Cycles aplikacijom na tvom iOS ili Android uređaju, to može značiti da je izvan dosega, da je baterija prazna ili da je u stanju mirovanja.	Pokušaj sljedeće korake za rješavanje problema: Pobrine se da ti telefon i NC° Band budu jedan blizu drugoga uključi svoj NC° Band u punjač Isključi Bluetooth na svom telefonu i ponovno ga uključi Ponovno otvori svoju NC° aplikaciju i pusti da aplikacija automatski pokuša pronaći tvoj uređaj Ako to ne uspije, pokušaj ručno povezati NC° Band putem stranice „Moj uređaj” Savjet: provjeri spajaš li se na ispravan NC° Band tako da usporediš serijski broj na narukvici s onim prikazanim na stranici Moj uređaj > Podaci o uređaju.

		Ako i dalje imaš poteškoća, obrati se korisničkoj podršci.
Moji podaci o temperaturi se ne sinkaju	To se može dogoditi iz više razloga, uključujući to da se tvoj uređaj isprazni ili da se ne poveže s aplikacijom.	Preporučujemo da nosiš uređaj u krevet s dovoljno baterije, da provjeriš jesu li aplikacija i NC° Band povezani te da je tvoj uređaj u potpunosti postavljen. Ako se ovaj problem nastavi pojavljivati, obrati se korisničkoj podršci.
Moji se podaci prikazuju kao nevažeći	Pogreška neispravnih podataka može se prikazati iz više razloga. To može uključivati kvar senzora, problem s prijenosom podataka ili poteškoće tijekom mjerenja.	Kontaktiraj korisničku podršku.

Tehničke specifikacije za povezivanje NC° Band narukvice i aplikacije na pametnom telefonu (neobavezno i namijenjeno samo korisnicima starijima od 18 godina)

Pogledaj oznake za pametni telefon i aplikaciju za pametni telefon za informacije o korištenju pametnog telefona i aplikacije.

zahtjevi za pametni telefon	smartfon s operativnim sustavom Android (verzija 11 ili novija) ili iOS (verzija 17 ili novija)
Broj inačice Bluetootha	Bluetooth LE V5.2
Frekvencijski raspon	2402 - 2480 MHz
Maks. prijenosna snaga/dBm	<10dBm

FCC izjava

VAŽNE INFORMACIJE KOJE ZAHTIJEVA FCC

Ovaj se uređaj pridržava dijela 15 pravila FCC-a. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neispravan rad.

NAPOMENA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalni

uređaj klase B, u skladu s dijelom 15 pravila FCC-a. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u kućnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti energiju radiofrekvencije te, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjeri ili premjesti prijemnu antenu.
- Povećaj razmak između opreme i prijamnika.
- Prikluči opremu u utičnicu na strujnom krugu koji je drukčiji od onoga na koji je priključen prijamnik.
- Obrati se prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć

IZMJENE: Sve promjene ili izmjene koje davatelj ove naprave izričito ne odobri mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje naprave.

Izjava FCC-a o izloženosti zračenju

Ova oprema zadovoljava FCC ograničenja izloženosti zračenju propisana za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem niti raditi u kombinaciji s njima.

IC izjave

Ovaj je uređaj u skladu s RSS standardom (ili standardima) za uređaje izuzetih od licence tvrtke Industry Canada. Korištenje je dopušteno samo pod sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije stvarati smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neispravan rad uređaja.

Ovaj je uređaj u skladu s CNR-ovima tvrtke Industrie Canada koji se primjenjuju na radijske uređaje izuzete od licence. Rad je dopušten pod sljedeća dva uvjeta: (1) uređaj ne smije stvarati smetnje i (2) korisnik uređaja mora prihvatiti sve radiouređajne smetnje koje se pojave, čak i ako bi takve smetnje mogle ometati rad uređaja

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

NAPOMENA: Ovaj digitalni uređaj klase B usklađen je s kanadskim standardom ICES-003. Ovaj digitalni uređaj klase* u skladu je s kanadskom normom NMB-003.

EU izjava o sukladnosti

Tvrtka Xiamen Intretech Inc. izjavljuje da je radijska oprema u skladu s Direktivom RED 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na help.naturalcycles.com.

Podaci o jamstvu

Proizvođač daje jamstvo od jedne godine, počevši od datuma kada je hardverski proizvod i pribor prodan krajnjem korisniku.

Jamstvo pokriva samo nedostatke u materijalu ili izradi.

Popravke u okviru jamstva smije obavljati samo ovlašteni servisni centar. Kada podnosiš zahtjev za ostvarivanje prava iz jamstva, moraš priložiti originalni račun (s datumom kupnje).

Jamstvo se neće primjenjivati u sljedećim slučajevima:

- Uobičajeno trošenje i habanje
- Neispravna uporaba, npr. preopterećenje uređaja ili uporaba neodobrenih dodataka
- Upotreba sile, šteta uzrokovana vanjskim utjecajima
- Šteta nastala zbog nepoštivanja uputa za uporabu, npr. priključivanja na neodgovarajuće mrežno napajanje ili nepoštivanja uputa za instalaciju
- Djelomično ili potpuno rastavljeni aparati

Ažuriranja softvera

Uređaj će povremeno primati softverske nadogradnje vezane uz ispravke grešaka, probleme ili promjene funkcionalnosti. Softverske nadogradnje za uređaj bit će dostupne tijekom cijelog vijeka trajanja uređaja.

Tijekom vijeka trajanja uređaja (pet godina) osigurava se usluga održavanja softvera.

Upozorenje prema Propoziciji 65

UPOZORENJE: Ovaj proizvod može sadržavati kemikalije za koje je država Kalifornija utvrdila da mogu uzrokovati urođene mane ili drugu štetu reproduktivnom sustavu.

Za više informacija o kemikalijama iz Propozicije 65 posjeti: <https://www.p65warnings.ca.gov/>

objašnjenje simbola

	Tehnička oprema i baterije ne pripadaju kućnom otpadu. Odložiti ih treba na odgovarajućim mjestima za prikupljanje i zbrinjavanje otpada.
	Referentni broj

	Broj serije
	Nepropusno za prašinu, zaštićeno od prskanja vodom

Naziv proizvođača:

Xiamen Intretech Inc.

Adresa proizvođača:

Br. 100, Dongfu West Road,
Distrikt Haicang, Xiamen, Fujian, Kina

Kontakt podaci:

<http://www.intretech.com/>

Predstavnik i uvoznik za EU:

Intretech Hungary Kft.
Ipartelepí út 18-20, 9330
Kapuvár, Mađarska

Predstavnik i uvoznik za Ujedinjeno Kraljevstvo:

Intretech UK
First Base Victoria
231 Vauxhall Bridge Road
London SW1V 1AD

Naziv uređaja:

NC° Band

Datum objave:

Ožujak 2026

Verzija dokumenta:

Vodič za korisnice NCBG1 1.2