

Handleiding

Modelnummer: NCBG1

Introductie

Lees deze instructies aandachtig en bewaar ze

Bedankt dat je de NC° Band hebt gekocht, lees deze instructies zorgvuldig door om de band op de juiste en veilige manier te gebruiken. Als je vragen of opmerkingen over de band hebt, neem dan contact op met Customer Support via help@naturalcycles.com.

Beoogd gebruik

De NC° Band verzendt via Bluetooth een verzameling van verschillende biomarkers en is bedoeld om een gezonde levensstijl te ondersteunen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen


- Dit product is niet bedoeld om gezondheidsproblemen of ziekten te diagnosticeren of te behandelen en mag niet worden gebruikt als vervanging voor overleg en advies van een arts of andere medisch professional.
- Houd het apparaat uit de buurt van bronnen met hoge niveaus van wisselstroom-magnetische velden om de kans op storingen te verkleinen.
- Het gebruik van het apparaat kan beperkt zijn in de aanwezigheid van elektromagnetische storingen. Dit kan leiden tot problemen zoals foutmeldingen of het uitvallen van het display/apparaat.
- Gebruik van accessoires, transducers en kabels anders dan die welke zijn gespecificeerd of geleverd door de fabrikant van deze apparatuur kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur en resulteren in onjuiste werking.
- Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij 30 cm (12 inch) bij enig deel van de apparatuur worden gebruikt, inclusief kabels die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Anders kan de werking van deze apparatuur verslechteren.
- Vervang een batterij niet door een onjuist type waardoor een beveiliging kan worden omzeild, gooi een batterij niet in vuur of een hete oven en verpletter of snijd een batterij niet mechanisch, omdat dit kan leiden tot een explosie of brand. Laat een batterij niet achter in een omgeving met een extreem hoge temperatuur, omdat dit kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas. Stel een batterij niet bloot aan een extreem lage luchtdruk, omdat dit kan leiden tot een explosie of de

lekkage van brandbare vloeistof of gas.

- Stel de batterij tijdens gebruik, opslag of transport niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen of aan lage luchtdruk op grote hoogte.

Voorzorgsmaatregelen

- Dit apparaat gebruikt Bluetooth Low Energy 5.2 om te communiceren met een speciale iOS/Android smartphone-app.
- De band is waterbestendig, niet waterdicht. Draag het apparaat niet onder de douche. Dompel de band nooit onder in water of andere vloeistoffen. Kook de band niet uit. Raadpleeg voor reinigen en desinfecteren de sectie Onderhoud en reiniging.
- Buiten het bereik van jonge kinderen en huisdieren houden.
- Gebruik de band niet als er tekenen van schade zijn of na een val/schok die schade kan hebben veroorzaakt. Probeer het apparaat niet te repareren als het beschadigd is. Neem contact op met Customer Support via help.naturalcycles.com.
- Niet bewaren in direct zonlicht of bij hoge temperaturen.
- Het gebruik van warmte- en koudeproducerende apparaten, zoals elektrische dekens, warmtekompresen of icepacks, kan de werking van het apparaat beïnvloeden en het risico op letsel voor de patiënt vergroten.
- De fabrikant raadt aan een wachtwoord op je smartphone te gebruiken

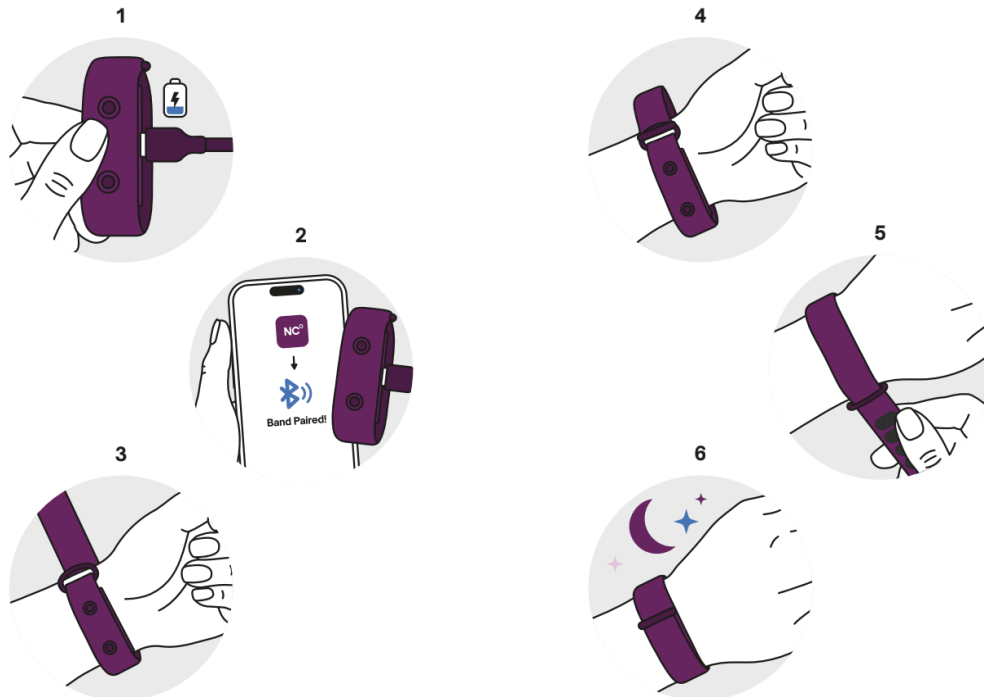

Je band gebruiken

Doe je band om voordat je gaat slapen. Zorg dat hij is opgeladen en strak om je onderpols zit.

Gegevens synchroniseren met de NC-app

Je kunt de gegevens die 's nachts zijn verzameld direct na het wakker worden, of later op de dag, naar je telefoon synchroniseren door de instructies in de app te volgen. Zodra je de app opent, worden de nachtelijke temperaturen via Bluetooth overgezet. Je ziet daarna één waarde uit de nacht op de pagina Gegevens toevoegen.

Problemen met het synchroniseren van temperaturen oplossen

Als je problemen hebt met het synchroniseren van je gegevens van de band naar de app, ga dan naar <https://help.naturalcycles.com/> of scan de QR-code hieronder en zoek de instructies voor verschillende typen apparaten.



Je armband onderhouden

Instructies voor verzorging en reinigen

Bewaar de band niet op een plek waar hij wordt blootgesteld aan direct zonlicht, stof of vocht. Vermijd extreme temperaturen. Probeer de band niet uit elkaar te halen. Reinig en desinfecteer het oppervlak van de band door het af te nemen met doekjes met 70% isopropylalcohol of met milde zeep en water. Dompel de band niet onder in vloeistof en steriliseer hem niet in een autoclaaf. Veeg de band droog met een droge doek en laat hem minimaal 5 minuten aan de lucht drogen. Er mag geen zichtbaar vuil meer aanwezig zijn nadat je het apparaat hebt gereinigd.



Je armband opladen

Als de batterij van het apparaat bijna leeg is, laten we dat in de app aan de gebruiker weten. Het opladen van het apparaat duurt ongeveer 2 uur. Tijdens het opladen knippert het LED-lampje langzaam. Wanneer het opladen voltooid is, brandt het lampje continu. De batterij gaat tot 14

dagen mee tussen oplaadbeurten.

Productspecificaties

Invoer	5V 1A
Nominale batterijspanning	3,7 V DC
Batterijtype	Lithium-Polymeer
Batterijduur tussen oplaadbeurten	Tot 14 dagen
Oplaadtijd batterij	Ongeveer 2 uur
Meetbereik (temperatuur en hartslag)	32-42°C (89.6-107.6°F), 30-115 beats per minute
Aanbevolen draagadvies	Gebruikers moeten de band minimaal 4 uur per nacht dragen terwijl ze slapen om het beoogde doel te bereiken
Huidcontactmaterialen	Polycarbonaat, ABS, siliconen (bij gebruik van siliconen band), nylon (bij gebruik van nylon band)
Bedrijfstemperatuur	15-40°C (59-104°F)
Afmetingen	45,5 x 19,5 x 13 mm
Gewicht	7 gram (0,25 ounce)
Geheugenfunctie	400kb
Levensduur	5 jaar

Problemen oplossen

De prestaties kunnen worden beïnvloed als een of meer van de volgende fouten optreden. Als je een andere fout tegenkomt, neem dan contact op met Customer Support.

Fout	Probleem/oorzaak	Oplossing
Mijn apparaat maakt geen verbinding met de app	Als je NC° Band geen verbinding maakt met de Natural Cycles-app op je iOS- of Android-apparaat, kan dat betekenen dat hij buiten bereik is, geen batterij meer heeft of in slaapstand staat.	Probeer het volgende om het probleem op te lossen: Zorg ervoor dat je telefoon en NC° Band dicht bij elkaar zijn Sluit je NC° Band aan op de oplader Schakel de Bluetooth van je telefoon uit en zet hem daarna weer aan Open je NC°-app opnieuw en laat de app automatisch proberen je apparaat te vinden Als dit niet lukt, probeer de NC° Band dan handmatig te verbinden via de pagina Mijn apparaat Tip: Zorg dat je verbinding maakt met de juiste NC° Band door te controleren of het

		serienummer overeenkomt met het nummer dat je ziet op je pagina Mijn apparaat > Apparaatinformatie. Heb je nog steeds problemen, neem dan contact op met de klantenservice.
Mijn temperatuurgegevens worden niet gesynchroniseerd	Dit kan om verschillende redenen gebeuren, bijvoorbeeld omdat je apparaat geen batterij meer heeft of niet met de app verbindt.	We raden je aan je apparaat 's nachts te dragen met voldoende batterij, te controleren of de app en de NC° Band verbonden zijn en of je apparaat volledig is ingesteld. Als dit probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice.
Mijn gegevens worden als ongeldig weergegeven	De foutmelding met ongeldige gegevens kan om verschillende redenen worden weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld komen door een sensorstoring, een probleem met de gegevensoverdracht of een fout tijdens het meten.	Neem contact op met de klantenservice.

Technische specificaties voor koppeling van NC° Band en smartphone-app (optioneel en alleen bedoeld voor gebruikers ouder dan 18 jaar)

Bekijk de etikettering van de smartphone en de smartphone-app voor informatie over het gebruik van de smartphone en de app.

Vereisten voor smartphones	Smartphone met Android OS (versie 11 of hoger) of iOS (versie 17 of hoger)
Bluetooth-versienummer	Bluetooth LE V5.2
Frequentiebereik	2402 - 2480 MHz
Max. zendvermogen/dBm	<10dBm

FCC-verklaring

BELANGRIJKE INFORMATIE VEREIST DOOR DE FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2)

dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storingen die ongewenste werking kunnen veroorzaken.

LET OP: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving. Dit apparaat wekt radiofrequente energie op, gebruikt deze en kan deze ook uitstralen en kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storingen veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat is aangesloten op een andere stroomgroep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp

WIJZIGING: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de vergunninghouder van dit apparaat, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan de door de FCC vastgestelde blootstellingslimieten voor straling voor een ongereguleerde omgeving.

Deze zender mag niet worden geplaatst in de nabijheid van, of gelijktijdig worden gebruikt met, een andere antenne of zender.

IC-verklaringen

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-standaard(en) van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking van het apparaat kunnen veroorzaken.

Dit apparaat voldoet aan de CNR-richtlijnen van Industrie Canada die van toepassing zijn op radioapparatuur die is vrijgesteld van een vergunning. Het gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen storing veroorzaken, en (2) de gebruiker van het apparaat moet alle ontvangen radiostoring accepteren, zelfs als deze storing de werking ervan kan verstoren

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

OPMERKING: Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003. Dit digitale apparaat van klasse* voldoet aan de Canadese norm NMB-003.

EU-conformiteitsverklaring

Xiamen Intretech Inc. verklaart dat de radioapparatuur voldoet aan de RED-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op help.naturalcycles.com.

Garantie-informatie

De fabrikant biedt een garantie van 1 jaar, ingaand op de datum waarop het hardwareproduct en de accessoires aan de eindgebruiker worden verkocht.

De garantie dekt alleen gebreken in materiaal of vakmanschap.

Reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij een beroep op de garantie moet de originele aankoopbon (met aankoopdatum) worden overlegd.

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Normale slijtage
- Onjuist gebruik, zoals overbelasting van het apparaat of het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
- Gebruik van geweld, schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijvoorbeeld aansluiting op een ongeschikte netvoeding of het niet opvolgen van de installatie-instructies
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten

Software-updates

Het apparaat ontvangt periodiek software-updates om bugs, problemen of functiewijzigingen aan te pakken. Software-updates voor het apparaat zijn beschikbaar gedurende de levensduur van het apparaat.

Tijdens de gebruiksduur van het apparaat (5 jaar) wordt de software-onderhoudsservice geleverd.

Waarschuwing volgens Proposition 65

WAARSCHUWING: Dit product kan chemicaliën bevatten waarvan in de staat Californië bekend is dat ze geboortefwijkingen of andere schade aan de voortplanting kunnen veroorzaken.

Ga voor meer informatie over Proposition 65-stoffen naar: <https://www.p65warnings.ca.gov/>

Uitleg van symbolen

	Technische apparatuur en batterijen horen niet bij het huishoudelijke afval. Je moet ze inleveren bij de daarvoor bestemde inzamel- en verwerkingspunten.
---	---

	Referentienummer
	Partijnummer
	Stofdicht, beschermd tegen spatwater

Naam van de fabrikant:

Xiamen Intretech Inc.

Adres van de fabrikant:

Nr. 100, Dongfu West Road,
Haicang District, Xiamen, Fujian, China

Contactgegevens:

<http://www.intretech.com/>

EU-vertegenwoordiger en importeur:

Intretech Hungary Kft.
Ipartelepi út 18-20, 9330
Kapuvár, Hongarije

Vertegenwoordiger en importeur in het VK:

Intretech UK
First Base Victoria
231 Vauxhall Bridge Road
Londen SW1V 1AD

Apparaatnaam:

NC° Band

Publicatiedatum:

Maart 2026

Documentversie:

NCBG1-gebruikershandleiding 1.2