

Ghid de utilizare

Număr model: NCBG1

Introducere

Te rugăm să citești și să salvezi aceste instrucțiuni

Îți mulțumim că ai achiziționat NC° Band, te rugăm să citești cu atenție aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea corectă și funcționarea sigură a benzii tale. Dacă ai întrebări sau comentarii despre bandă, contactează Serviciul Clienți la help@naturalcycles.com.

Utilizare prevăzută

NC° Band transferă prin Bluetooth o colecție de diverși biomarkeri și este destinat să promoveze un stil de viață sănătos.

Avertismente și precauții


- Acest produs nu este destinat să diagnosticheze sau să trateze nicio problemă de sănătate sau boală și nu trebuie utilizat ca substitut pentru consultarea și sfatul unui medic sau al unui alt profesionist medical.
- Păstrează dispozitivul departe de surse cu niveluri ridicate de câmpuri magnetice ale liniilor electrice pentru a reduce probabilitatea interferențelor.
- Utilizarea dispozitivului poate fi limitată în prezența perturbărilor electromagnetice. Acest lucru poate duce la probleme precum mesaje de eroare sau defecțiuni ale afișajului/dispozitivului.
- Utilizarea accesoriilor, a traductorilor și a cablurilor altele decât cele specificate sau furnizate de producătorul acestui echipament ar putea duce la creșterea emisiilor electromagnetice sau la scăderea imunității electromagnetice a acestui echipament și ar putea avea ca rezultat funcționarea necorespunzătoare.
- Echipamentele portabile de comunicații RF (inclusiv periferice precum cabluri de antenă și antene externe) trebuie utilizate la o distanță de cel puțin 12 in (30 cm) de orice parte a echipamentului, inclusiv cablurile specificate de producător. În caz contrar, performanța acestui echipament ar putea fi afectată.
- Nu înlocui bateria cu un tip incorect care poate anula o măsură de siguranță, nu arunca bateria în foc sau într-un cuptor fierbinte și nu strivi sau tăia mecanic bateria, deoarece acestea pot duce la explozie sau incendiu. Nu lăsa bateria într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată, deoarece poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil. Nu expune bateria la o presiune a aerului extrem de scăzută, deoarece poate duce la explozie sau la

scurgere de lichid sau gaz inflamabil.

- Nu expune bateria la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute sau la presiune atmosferică scăzută la altitudine mare în timpul utilizării, depozitării sau transportului.

Precauții

- Acest dispozitiv folosește Bluetooth Low Energy 5.2 pentru a interacționa cu o aplicație dedicată pentru smartphone iOS/Android.
- Brățara este rezistentă la apă, nu impermeabilă. Nu purta dispozitivul când faci duș. Nu scufunda niciodată brățara în apă sau alte lichide. Nu fierbe brățara. Pentru curățare și dezinfectare, te rugăm să consulți secțiunea Îngrijire și Curățare.
- A se păstra departe de accesul copiilor mici și al animalelor de companie.
- Nu folosi brățara dacă există semne de deteriorare sau după o cădere/șoc care ar fi putut cauza deteriorări. Dacă este deteriorată, nu încerca să o repari. Te rugăm să contactezi Serviciul Clienți la help.naturalcycles.com.
- Nu depozita la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.
- Utilizarea dispozitivelor care produc căldură și frig, cum ar fi păturile electrice, pernele termice sau pungile cu gheață, poate afecta performanța dispozitivului și poate crește riscul de vătămare a pacientului.
- Producătorul recomandă utilizarea unei parole pe smartphone-ul tău

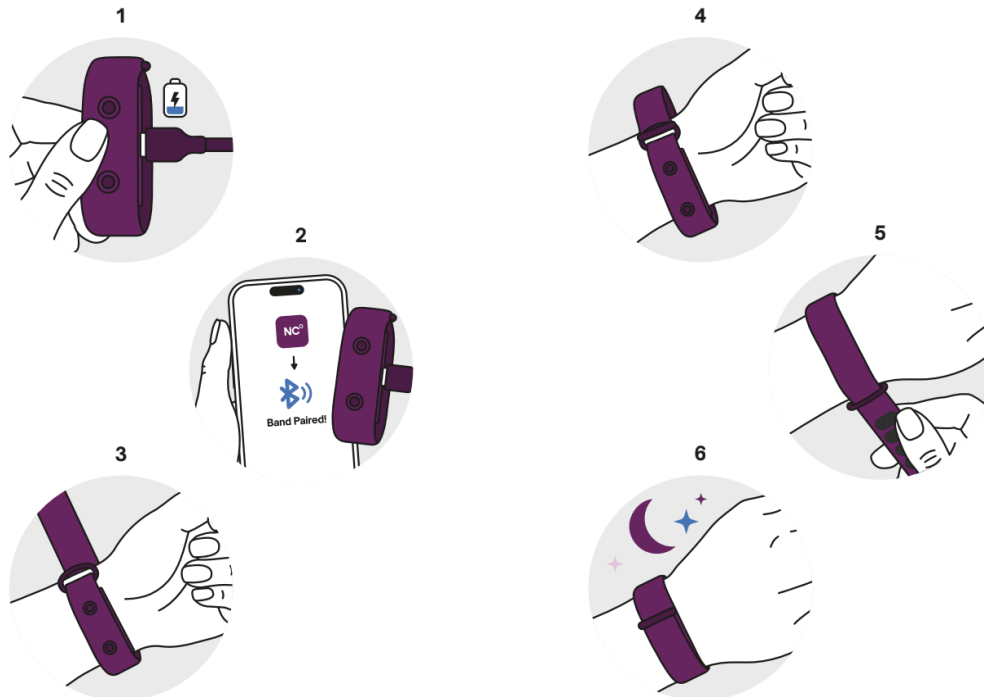

Utilizarea benzii tale

Pune-ți brățara înainte de a merge la culcare. Asigură-te că este încărcată și purtată strâns pe partea de jos a încheieturii.

Sincronizarea datelor cu aplicația NC

Poți sincroniza datele colectate în timpul nopții cu telefonul tău imediat când te trezești sau mai târziu în cursul zilei, urmând instrucțiunile din aplicație. Odată ce deschizi aplicația, temperaturile nocturne vor fi transferate prin Bluetooth. Vei vedea apoi o singură valoare extrasă din noapte în Pagina Adaugă date.

Depanare sincronizare temperaturi

Dacă întâmpini probleme la sincronizarea datelor de pe bandă în aplicație, te rugăm să vizitezi <https://help.naturalcycles.com/> sau scanează codul QR de mai jos și găsește instrucțiunile pentru diferite tipuri de dispozitive.



Întreținerea benzii tale

Instrucțiuni de îngrijire și curățare

Nu depozita banda în locuri unde va fi expusă la lumina directă a soarelui, praf sau umiditate. Evită temperaturile extreme. Nu încerca să dezassemblezi banda. Curăță și dezinfectează suprafața benzii ștergând-o cu șervețele cu alcool izopropilic 70% sau cu săpun ușor și apă. Nu scufunda în niciun lichid și nu steriliza în autoclavă. Șterge banda cu o cârpă uscată și lasă-o să se usuce la aer timp de cel puțin 5 minute. Nu ar trebui să existe murdărie vizibilă după curățarea dispozitivului.



Încărcarea brățării tale

Dacă bateria dispozitivului este descărcată, utilizatoarea va fi informată în aplicație. Dispozitivul durează aproximativ 2 ore pentru a se încărca. În timpul încărcării, LED-ul pulsează lent. Când

încărcarea este completă, lumina se aprinde constant. Durata de viață a bateriei este de până la 14 zile între încărcări.

Specificații produs

Introducere	5V 1A
Tensiune nominală baterie	3,7V DC
Tip baterie	Polimer de litiu
Durata de viață a bateriei între încărcări	Până la 14 zile
Timp de încărcare a bateriei	Aproximativ 2 ore
Interval de măsurare (temperatură și ritm cardiac)	32-42°C (89.6-107.6°F), 30-115 beats per minute
Ghid de purtare recomandat	Utilizatorii trebuie să poarte banda cel puțin 4 ore pe noapte în timpul somnului pentru a îndeplini scopul propus
Materiale în contact cu pielea	Polycarbonat, ABS, silicon (dacă folosești banda de silicon), nailon (dacă folosești banda de nailon)
Temperatura de funcționare	15-40°C (59-104°F)
Dimensiuni	45,5 x 19,5 x 13 mm
Greutate	7 grame (0,25 uncii)
Funcția de memorie	400 kb
Durata de viață a serviciului	5 ani

Depanare

Performanța poate fi afectată dacă apare una sau mai multe dintre următoarele erori. Dacă întâmpini o altă eroare, te rugăm să contactezi Serviciul Clienți.

Eroare	Problemă/Cauză	Soluție
Dispozitivul meu nu se conectează la aplicație	Dacă NC° Band nu se conectează la aplicația Natural Cycles pe dispozitivul tău iOS sau Android, acest lucru ar putea însemna că este prea departe, bateria este descărcată sau este în modul sleep.	Te rugăm să încerci următorii pași de depanare: Asigură-te că telefonul și NC° Band sunt aproape unul de celălalt Conectează NC° Band la încărcător Dezactivează Bluetooth-ul telefonului și activează-l din nou Deschide din nou aplicația NC° și lasă aplicația să încerce să găsească automat dispozitivul tău Dacă acest lucru eșuează, încearcă să conectezi NC° Band manual prin pagina Dispozitivul meu

		Sfat: Asigură-te că te conectezi la NC° Band-ul corect verificând că numărul său de serie corespunde cu cel afișat în pagina Dispozitivul meu > Informații dispozitiv. Dacă întâmpini în continuare probleme, te rugăm să contactezi Serviciul Clienți.
Datele mele de temperatură nu se sincronizează	Acest lucru se poate întâmpla din mai multe motive, inclusiv descărcarea bateriei dispozitivului tău sau neconectarea la aplicație.	Îți recomandăm să porți dispozitivul în timpul somnului cu bateria suficient încărcată, să verifici că aplicația și NC° Band sunt conectate și că dispozitivul tău este complet configurat. Dacă această problemă persistă, te rugăm să contactezi Serviciul Clienți.
Datele mele sunt afișate ca invalide	Eroarea de date invalide poate fi afișată din mai multe motive. Acestea includ o defecțiune a senzorului, o problemă cu transferul de date sau probleme în timpul măsurării.	Contactează Serviciul Clienți.

Specificații tehnice pentru conectarea NC° Band și aplicația pentru smartphone (Opțional și destinat doar utilizatorilor peste 18 ani)

Te rugăm să consulți etichetarea pentru Smartphone și aplicația pentru Smartphone pentru informații privind utilizarea smartphone-ului și a aplicației.

Cerințe pentru smartphone	Smartphone cu sistem de operare Android (versiunea 11 sau mai recentă) sau iOS (versiunea 17 sau mai recentă)
Versiune Bluetooth	Bluetooth LE V5.2
Interval de frecvență	2402 - 2480 MHz
Putere maximă de transmisie/dBm	<10dBm

Declarație FCC

INFORMAȚII IMPORTANTE SOLICITATE DE FCC

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 a Regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest

dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențele care pot cauza funcționare nedorită.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform Părții 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație.

Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televizate, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau relocați antena de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor

MODIFICARE: Orice modificări sau schimbări care nu sunt aprobate în mod expres de către furnizorul acestui dispozitiv ar putea anula dreptul utilizatorului de a opera dispozitivul.

Declarație privind expunerea la radiații FCC

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat.

Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat sau să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau transmițător.

Declarații IC

Acest dispozitiv este conform cu standardele RSS scutite de licență Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Acest dispozitiv este conform cu standardele CNR ale Industriei Canada aplicabile dispozitivelor radio scutite de licență. Funcționarea este permisă în următoarele două condiții: (1) dispozitivul nu trebuie să producă interferențe și (2) utilizatorul dispozitivului trebuie să accepte orice interferență radio suferită, chiar dacă interferența este susceptibilă să compromită funcționarea acestuia

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

NOTĂ: Acest aparat digital de Clasa B este conform cu standardul canadian ICES-003. Acest dispozitiv digital de clasa* este conform cu standardul canadian NMB-003.

Declarație de conformitate UE

Xiamen Intretech Inc. declară că echipamentul radio este în conformitate cu Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la help.naturalcycles.com.

Informații despre garanție

Producătorul oferă o garanție de 1 an, începând de la data la care produsul hardware și accesoriile sunt vândute utilizatorului final.

Garanția acoperă doar defectele de material sau de fabricație.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate doar de un centru de service autorizat. La depunerea unei reclamații în garanție, trebuie prezentat bonul fiscal original (cu data achiziției).

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

- Uzură normală
- Utilizare incorectă, de exemplu supraîncărcarea aparatului sau utilizarea unor accesorii neaprobate
- Utilizarea forței, daune cauzate de influențe externe
- Daune cauzate de nerespectarea manualului de utilizare, de ex. conectarea la o sursă de alimentare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare
- Aparat parțial sau complet demontat

Actualizări software

Dispozitivul va primi periodic actualizări de software în ceea ce privește erorile, problemele sau modificările de funcționalități. Actualizările de software ale dispozitivului vor fi disponibile pe toată durata de viață a dispozitivului.

Pe durata de viață a dispozitivului (5 ani), este furnizat serviciul de întreținere software.

Avertisment Propunerea 65

AVERTISMENT: Acest produs poate conține substanțe chimice cunoscute în Statul California ca fiind cauze ale defectelor congenitale sau ale altor afecțiuni reproductive.

Pentru mai multe informații despre substanțele chimice din Propunerea 65, te rugăm să vizitezi:

<https://www.p65warnings.ca.gov/>

Explicația simbolurilor

	Echipamentele tehnice și bateriile nu trebuie aruncate la deșeurile menajere. Acestea trebuie eliminate la punctele de colectare și eliminare corespunzătoare.
---	--

	Număr de referință
	Număr lot
	Etanș la praf, protejat împotriva stropilor de apă

Numele producătorului:

Xiamen Intretech Inc.

Adresa producătorului:

Nr. 100, Drumul Dongfu de Vest,
Districtul Haicang, Xiamen, Fujian, China

Informații de contact:

<http://www.intretech.com/>

Reprezentant UE și importator:

Intretech Hungary Kft.
Ipartelepi út 18-20, 9330
Kapuvár, Ungaria

Reprezentant și importator pentru Regatul Unit:

Intretech UK
First Base Victoria
231 Vauxhall Bridge Road
London SW1V 1AD

Numele dispozitivului:

NC° Band

Data publicării:

Martie 2026

Versiunea documentului:

Ghid de utilizare NCBG1 1.1