

Ceci est un élément de formation. Pour une information complète notamment concernant les indications, contre-indications, mises en garde, précautions d'emploi et effets indésirables, se référer à la notice d'utilisation.

Pour usage professionnel. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation, notamment pour une information complète concernant les indications, contre-indications, mises en garde, précautions d'emploi et effets indésirables.

Edwards, Edwards Lifesciences, le logo stylisé E, SAPIEN, SAPIEN 3 et SAPIEN 3 Ultra sont des marques d'Edwards Lifesciences Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


© 2024 Edwards Lifesciences Corporation. Tous droits réservés.
NP--FR-0510 v1.0 - 09/24
Edwards Lifesciences SAS • Immeuble Gerschwin, 1 rue A. Schoenberg,
78280 Guyancourt, France. 01 30 05 29 29 • RCS Versailles B 429 487 507




Valve SAPIEN 3				
Valve SAPIEN 3 Ultra				
	20 mm	23 mm	26 mm	29 mm
Surface nominale de la valve	328 mm ²	406 mm ²	519 mm ²	649 mm ²

Valves Cardiaques
Transcathéter
SAPIEN 3
et SAPIEN 3 Ultra

Guide de mesure 3D

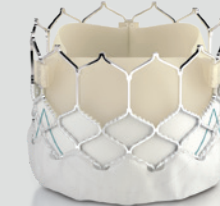

Valve SAPIEN 3

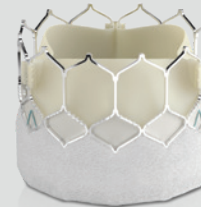

Valve SAPIEN 3 Ultra

Edwards Lifesciences
Traduction française du SOP4407EL78 REV : E (2022)



Les facteurs anatomiques du patient et les risques associés au sous-dimensionnement et au sur-dimensionnement doivent être considérés durant le choix de la taille de valve

- Toutes les valeurs sont données en fonction du volume nominal recommandé d'inflation.
- Des mesures en phase de systole sont recommandées.

[illegible]

En gras: Les zones d'étanchéité s'appliquent uniquement si les valves sont déployées avec le volume nominal.